




# Pure C&G IX

Gebruiksaanwijzing

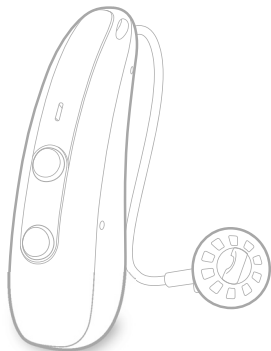

Made for

 iPhone | iPad | iPod

# Inhoudsopgave

<b>Welkom</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>Uw hoortoestel</b>	<b>5</b>
<hr/>	
Soort hoortoestel	5
Vertrouwd raken met uw hoortoestellen	6
Componenten en benamingen	7
Bedieningsregelaars	9
Luisterprogramma's	11
Functies	11
<b>Dagelijks gebruik</b>	<b>12</b>
<hr/>	
De hoortoestellen in- en uitdoen	13
In- en uitschakelen	19
Overschakelen naar standby-stand	21
Het volume aanpassen	22
Het kiezen van een luisterprogramma	23
Bijkomende aanpassingen (optioneel)	23
Opladen	24
<b>Bijzondere luistersituaties</b>	<b>27</b>
<hr/>	
Aan de telefoon	27
Audiostreaming met iPhone	28
Audiostreaming met een Android smartphone	28
Bluetooth	29

<b>Onderhoud en verzorging</b>	<b>30</b>
Hoortoestellen	30
Oorstukjes	32
Professioneel onderhoud	35
<b>Belangrijke veiligheidsinformatie</b>	<b>36</b>
<b>Meer informatie</b>	<b>39</b>
Accessoires	39
Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden	39
Verwijderingsinformatie	41
In dit document gebruikte symbolen	42
Probleemoplossing voor hoortoestel	43
Specifieke nationale informatie	45
Service en garantie	46

# Welkom

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze hoortoestellen. Natuurlijk heeft u, net zoals met alle nieuwigheden, even tijd nodig om hiermee vertrouwd te raken.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die uw hoortoestellen u bieden.

Om zoveel mogelijk profijt van uw hoortoestellen te hebben, adviseren wij u om ze de hele dag te dragen. Hierdoor zult u er snel aan gewend raken.



Uw toestel kan er iets anders uitzien dan de afbeeldingen in deze handleiding. We behouden ons het recht voor de wijzigingen door te voeren die we noodzakelijk achten.



## **VOORZICHTIG**

Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidshandleiding grondig en volledig door. Volg de veiligheidsinformatie om schade of letsel te vermijden.



Laad uw hoortoestellen volledig op voordat u ze voor het eerst gebruikt. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de lader.

# Uw hoortoestel



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft optionele functies waarover uw hoortoestellen al dan niet beschikken.

Vraag uw audicien om aan te geven welke functies gelden voor uw hoortoestellen.

## Soort hoortoestel

U heeft een RIC (Receiver-in-Canal (Ontvanger-in-kanaal)) model hoortoestellen. De ontvanger wordt in het oorkanaal geplaatst en met het toestel verbonden via een ontvangerkabel. De toestellen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen met een verstandelijk niveau lager dan dat van een 3-jarige.

In uw hoortoestel is permanent een accu (oplaadbare lithium-ionbatterij) ingebouwd. Dit maakt snel opladen mogelijk met Pure Charger of de optionele Pure Portable Charger of Pure Dry&Clean Charger.

Met de draadloze functionaliteit kunt u geavanceerde audiologische functies gebruiken en uw twee hoortoestellen synchroniseren.

Uw hoortoestellen zijn voorzien van Bluetooth® Low Energy\* technologie waarmee u eenvoudig gegevens kunt uitwisselen met uw smartphone en voor naadloze audiostreaming met uw iPhone\*\* en voor sommige Android smartphones die audiostreaming voor hoortoestellen (ASHA) ondersteunen.

## **Vertrouwd raken met uw hoortoestellen**

Het is aan te bevelen dat u zich vertrouwd maakt met uw nieuwe hoortoestellen. Terwijl u de hoortoestellen in uw hand houdt, probeert u de bedieningsregelaars te gebruiken en gaat u na waar ze zich op het toestel bevinden. Daardoor kunt u de bedieningsregelaars gemakkelijker terugvinden en bedienen wanneer u de hoortoestellen draagt.




Als u problemen hebt met de bedieningsregelaars van uw hoortoestellen terwijl u ze draagt, kunt u bij uw audicien vragen of er een afstandsbediening of een smartphone-app beschikbaar is om uw hoortoestellen te bedienen.

\* De Bluetooth markering en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door WS Audiology Denmark A/S van dit product gebeurt onder licenties. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.




\*\* iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
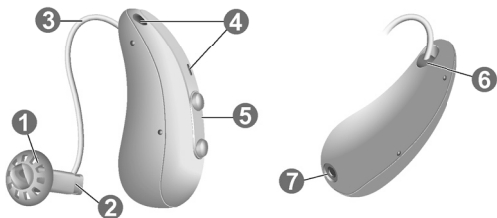
## Componenten en benamingen



- 
- |                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Oorstukje             | 5 Tuimelschakelaar (bediening, aan/uit-schakelaar)                                          |
| 2 Luidspreker           |                                                                                             |
| 3 Luidsprekerverbinding | 6 Zijde-indicatie (rood = rechter oor, blauw = linker oor) en verbinding met de luidspreker |
| 4 Microfoonopeningen    |                                                                                             |
|                         | 7 Oplaadcontactpunten                                                                       |
-

U kunt de volgende standaard oorstukjes gebruiken:

<b>Standaard oorstukjes</b>	<b>Formaat</b>
<input type="radio"/>  Sleeve 3.0 Vented/Closed/ Power	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Open	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Tulip	

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

#### **Op maat gemaakte oorstukjes**

- |                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="radio"/>  Earmold 3.0 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## Bedieningsregelaars

Met de tuimelschakelaar kunt u bijvoorbeeld een ander luisterprogramma kiezen. De audicien heeft de door u gewenste functies geprogrammeerd in de tuimelschakelaar.

<b>Functie tuimelschakelaar</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
<b>Kort indrukken:</b>		
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder/zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-therapiesignaal hoger/lager niveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tv-stream aan/uit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ongeveer 2 seconden indrukken:</b>		
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder/zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-therapiesignaal hoger/lager niveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tv-stream aan/uit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Onderste knop langer dan 3 seconden indrukken:</b>		
In-/uitschakelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

L = Links, R = Rechts

**i**

U kunt ook een afstandsbediening gebruiken om luisterprogramma's te kiezen en het volume van uw hoortoestellen aan te passen. Met onze smartphone-app beschikt u over nog meer bedieningsmogelijkheden.

## Luisterprogramma's

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Het kiezen van een luisterprogramma".

## Funcities

- Dankzij de **inschakelvertraging** kunt u hoortoestellen zonder fluitgeluiden inbrengen.  
Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "In- en uitschakelen".
  
- De **tinnitus-therapiefunctie** genereert een geluid dat u afleidt van uw tinnitus.

## Dagelijks gebruik

Om een comfortabel en gemakkelijk gebruik van uw hoortoestellen te garanderen, zijn ze uitgerust met een geïntegreerd bedieningselement.

Daarnaast is er een app voor Android en iPhones om de bediening van uw hoortoestellen nog eenvoudiger te maken. Neem contact op met uw audicien voor het downloaden en installeren van de smartphone app.

## De hoortoestellen in- en uitdoen

Uw hoortoestellen zijn afgesteld op uw linker- en rechteroor. Kleurmarkeringen geven de zijde aan:

- rode markering = rechter oor
- blauwe markering = linker oor




Een hoortoestel indoen:


- ▶ Zorg er bij Sleeves voor dat de bocht van de Sleeve is uitgelijnd met de bocht van de luidsprekerverbinding.

Zie de afbeeldingen op de volgende pagina.

Juist:

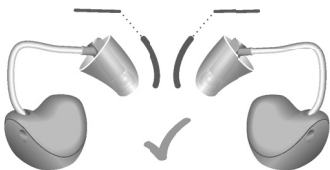

Niet juist:

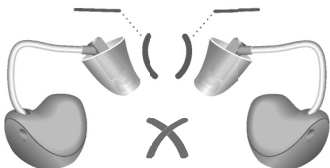


- ▶ Houd de luidsprekerverbinding vast aan de bocht die zich het dichtst bij het oorstukje bevindt.

- ▶ Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang ①.

- ▶ Draai het lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat zich lucht in de gehoorgang ophoopt.

- ▶ Til het hoortoestel op en schuif het over de bovenkant van uw oor ②.

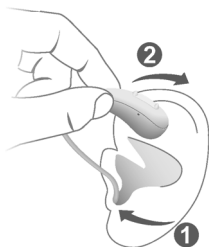

#### **VOORZICHTIG**

Risico op letsel!

- ▶ Draag de luidsprekerverbinding altijd met een oorstukje.
- ▶ Let erop dat het oorstukje volledig bevestigd is.



#### **VOORZICHTIG**

Risico op letsel!

- ▶ Plaats het oorstukje voorzichtig en niet te diep in het oor.


**i**

- Het kan handig zijn om het **rechter** hoortoestel met de **rechter** hand en het **linker** hoortoestel met de **linker** hand in te doen.
- Als u problemen hebt met het inbrengen van het oorstukje, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het oorstukje gemakkelijker worden ingebracht.

De optionele ConchaLock zorgt ervoor dat het oorstukje veilig in uw oor blijft zitten. Om de optionele ConchaLock te bevestigen:

### Concha Lock Sleeve 3.0

- ▶ Lijn de Concha Lock Sleeve 3.0 uit met de luidspreker zoals aangegeven op de afbeelding. Schuif de Concha Lock Sleeve 3.0 vervolgens zo over de luidspreker dat deze stevig zit.

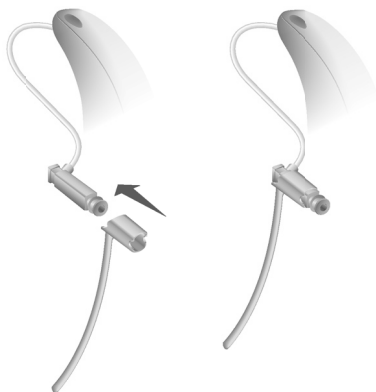

### Concha Lock 3.0

- ▶ Lijn het uiteinde van de ConchaLock uit met het platte uiteinde van de luidspreker.





- ▶ Druk vervolgens de ConchaLock richting de luidspreker totdat deze vastklikt.




Om de ConchaLock te plaatsen:

- ▶ Buig de ConchaLock en plaats deze zorgvuldig in het dieper gelegen deel van uw oor (zie afbeelding).



Een hoortoestel uitdoen:

- ▶ Til het hoortoestel op en schuif het over de bovenkant van uw oor ①.
  - ▶ Als uw hoortoestel uitgerust is met een op maat gemaakt oorstukje of een mold, verwijdert u deze door het kleine trekkoord naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.
  - ▶ Voor alle andere oorstukjes: Pak de luidspreker in de gehoorgang vast met twee vingers en trek de luidspreker voorzichtig uit het oor ②.
- Trek niet aan de luidsprekerverbinding.

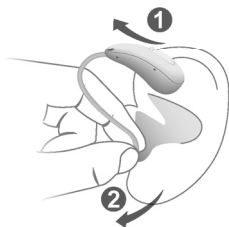



## VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ In zeer zelden voorkomende gevallen kan het oorstukje in uw oor achterblijven wanneer u het hoortoestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorstukje dan verwijderen door een medisch specialist.

Reinig en droog uw hoortoestellen na gebruik.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

## In- en uitschakelen

U heeft de volgende mogelijkheden om uw hoortoestellen in of uit te schakelen.

Via de oplader:

- ▶ Inschakelen: Haal de toestellen uit de oplader.

In uw hoortoestellen wordt de beginmelodie afgespeeld. Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- ▶ Uitschakelen: Plaats de hoortoestellen in de lader.

Let op: de lader moet aangesloten zijn op de voedingsbron. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de lader.

Via de tuimelschakelaar:

- ▶ **Inschakelen:** Houd het onderste deel van de tuimelschakelaar ingedrukt totdat de opstartmelodie klinkt. Laat de tuimelschakelaar los terwijl de melodie wordt afgespeeld.



Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- ▶ **Uitschakelen:** Houd het onderste deel van de tuimelschakelaar enkele seconden ingedrukt. Er wordt een afsluitlemelodie afgespeeld.



Wanneer de **inschakelvertraging** geactiveerd is, schakelen de hoortoestellen met enkele seconden vertraging in. Gedurende die tijd kunt u de hoortoestellen plaatsen zonder een vervelend fluitgeluid te horen.

De "inschakelvertraging" kan door uw audiciens worden geconfigureerd.

## Overschakelen naar standby-stand

Met de afstandsbediening kunt u uw hoortoestellen in de stand-by modus zetten. Dit dempt de hoortoestellen. Wanneer u de stand-bystand verlaat, worden het **laatst gebruikte** volume en luisterprogramma ingesteld.

Opmerking:

- In stand-bystand worden de hoortoestellen **niet** volledig uitgeschakeld. Ze verbruiken een kleine hoeveelheid stroom.

Daarom bevelen we aan om de stand-bystand alleen voor korte tijd te gebruiken.

- Als u de stand-bystand wilt verlaten, maar geen toegang hebt tot de afstandsbediening: Zet uw hoortoestellen uit en opnieuw aan (met de tuimelschakelaar of door ze even in de lader te plaatsen tot minstens een LED gaat branden). In dit geval worden het **standaard** volume en luisterprogramma ingesteld.

## Het volume aanpassen

Uw hoortoestellen passen automatisch het volume aan de luistersituatie aan.

- ▶ Als u er de voorkeur aan geeft het volume handmatig te regelen, drukt u op het bovenste deel van de tuimelschakelaar om het volume te verhogen of op het onderste deel om het volume te verlagen.

Zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen" om de tuimelschakelaar in te stellen.

Bij het wijzigen van het volume kan er optioneel een signaal worden afgegeven. Wanneer het maximale of het minimale volume bereikt is, hoort u mogelijk een optionele signaaltoon.

## **Het kiezen van een luisterprogramma**

Afhankelijk van de luistersituatie passen uw hoortoestellen het geluid automatisch aan.

Uw hoortoestellen hebben mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon geeft een programmawisseling aan.

- ▶ Druk kort op de tuimelschakelaar om van hoorprogramma te wisselen.

Zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen" om de tuimelschakelaar in te stellen. Zie het hoofdstuk "Luisterprogramma's" voor een lijst van uw luisterprogramma's.

Het standaard volume wordt toegepast.

## **Bijkomende aanpassingen (optioneel)**

U kunt de bedieningsregelaars van het hoortoestel ook gebruiken om andere parameters te wijzigen, bijvoorbeeld het geluidsvolume van het tinnitus-therapiesignaal.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

## Opladen

Voor het opladen kunt u kiezen uit verschillende opties:



---

① Pure Charger

③ Pure Dry&Clean Charger

② Pure Portable  
Charger

---

- ▶ Plaats uw hoortoestellen in de lader.
- ▶ Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de lader. U vindt ook nuttige laadtips in de gebruiksaanwijzing van de lader.





Reinig de oplaadcontactpunten van uw hoortoestellen voordat u uw hoortoestellen in de oplader doet. Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

### **Indicatie van laag vermogen**

U hoort een alarmsignaal dat aangeeft dat de powercell bijna leeg is. Het signaal wordt om de 15 tot 30 minuten herhaald, afhankelijk van de instelling. Afhankelijk van het gebruik van uw hoortoestellen heeft u ongeveer 1,5 uur de tijd om uw hoortoestellen op te laden voordat deze stoppen met werken.

Houd er rekening mee dat de accu sneller leegloopt als er te veel functies tegelijkertijd worden gebruikt.

### **Oplaadtips**

Mogelijk hebt u vragen over hoe u uw hoortoestellen het beste kunt opladen. Lees de vragen en antwoorden hieronder. Als u meer vragen hebt, dan zal uw audicien u hierbij helpen.



### **Hoe vaak moet ik de hoortoestellen opladen?**

Wij bevelen aan om de hoortoestellen dagelijks op te laden, ook als de accu niet leeg is. Laad ze 's nachts op, zodat u uw dag kunt starten met volledig opgeladen hoortoestellen.

## **Hoelang duurt het opladen?**

Een volledige oplaadcyclus duurt ongeveer 4 uur.

Na 30 minuten kunt u uw hoortoestellen tot 6 uur lang gebruiken.

Oplaadtijden kunnen variëren afhankelijk van het gebruik van de hoortoestellen en de ouderdom van de powercell.

## **Wat gebeurt er wanneer ik ze vergeet op te laden?**

Uw hoortoestellen worden automatisch uitgeschakeld wanneer de accu leeg is. Laad de hoortoestellen zo snel mogelijk op.

Hoortoestellen die langer dan 6 maanden niet zijn opgeladen, kunnen beschadigd zijn door een niet-herstelbare diepe ontlading van de accu. Diep ontladen accu's kunnen niet meer worden opgeladen en moeten worden vervangen.

# Bijzondere luistersituaties

## Aan de telefoon

Wanneer u telefoneert, houdt u de telefoonluidspreker iets boven uw oor. Het hoortoestel en de telefoonluidspreker moeten zich op één lijn bevinden. Draai de luidspreker lichtjes, zodat het oor niet volledig bedekt is.



## Telefoonprogramma

Wellicht prefereert u een bepaald volume wanneer u de telefoon gebruikt. Vraag uw audicien om een telefoonprogramma te configureren.

- Schakel over naar het telefoonprogramma wanneer u telefoneert.

Als voor uw hoortoestellen een telefoonprogramma is geconfigureerd, staat dit vermeld in het hoofdstuk "Luisterprogramma's".

## **Audiostreaming met iPhone**

Uw hoortoestellen zijn geschikt voor Made for iPhone . Dit houdt in dat u met uw hoortoestellen rechtstreeks telefoongesprekken kunt voeren en muziek kunt luisteren vanaf uw iPhone.

Daarnaast kunt u mogelijk met uw hoortoestellen handsfree bellen via compatibele iPhone- en iPad-apparaten.

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over compatibele iOS-apparaten, koppeling, audiostreaming en andere handige functies.

## **Audiostreaming met een Android smartphone**

Als uw smartphone Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) ondersteunt, kunt u met uw hoortoestellen rechtstreeks telefoongesprekken voeren en naar muziek luisteren vanaf uw smartphone.

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over compatibele Android apparaten, koppeling, audiostreaming en andere handige functies.

## **Bluetooth**

Uw hoortoestellen zijn uitgerust met Bluetooth draadloze technologie om audiostreaming van mobiele telefoons of andere compatibele apparaten mogelijk te maken.

In een vliegtuig kan het gebruik van Bluetooth functionaliteit worden beperkt, vooral tijdens het opstijgen en landen. Als dit het geval is, kunt u via de smartphone-app de draadloze Bluetooth-technologie in uw hoortoestellen uitschakelen.

# Onderhoud en verzorging

Ter voorkoming van schade is het belangrijk dat u uw hoortoestellen verzorgt en dat u een aantal basisregels volgt. Deze worden al snel onderdeel van uw dagelijkse routine.

## Hoortoestellen

### Reinigen

Uw hoortoestellen zijn voorzien van een beschermende coating. Als ze echter niet regelmatig worden gereinigd, kunnen de hoortoestellen beschadigd raken of kunnen deze persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw hoortoestellen dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel de toestellen nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Gebruik geen alcoholoplossingen op de laadcontacten.
- ▶ Gebruik ter voorkoming van corrosie een zachte, droge doek om zweet of andere vloeistoffen van de laadcontacten en de hoortoestellen te vegen voordat u ze in de lader doet.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsmiddelen, speciale verzorgingssets en



verdere informatie over hoe u uw hoortoestellen in een goede staat houdt.

## Drogen

U kunt gewone producten gebruiken om uw hoortoestellen te drogen. Informeer bij uw audicien naar aanbevolen droogproducten en individuele instructies over wanneer u uw hoortoestellen moet drogen.

## Opslag

- Opslag voor korte tijd (tot enkele dagen): Schakel uw hoortoestellen uit met de tuimelschakelaar of plaats ze in de op het stroomnet aangesloten lader.

De lader moet aangesloten zijn op de voedingsbron. Als de lader niet op de voedingsbron is aangesloten en u de hoortoestellen in de lader plaatst, dan worden de hoortoestellen **niet** uitgeschakeld.

Let op: als u de hoortoestellen uitschakelt met een afstandsbediening of smartphone app, dan worden de hoortoestellen **niet** volledig uitgeschakeld. Ze bevinden zich in stand-bystand en verbruiken nog een beetje stroom.

- Opslag voor lange tijd (weken, maanden, ...): Laad eerst uw hoortoestellen volledig op. Schakel ze uit met de tuimelschakelaar voordat u ze opbergt. Wij raden aan om droogproducten te gebruiken bij het opbergen van de hoortoestellen.

Elke 6 maanden moet u de hoortoestellen opladen om een onherstelbare diepe ontlading van de powercell

te voorkomen. Diep ontladen powercells kunnen niet meer worden opgeladen en moeten worden vervangen. Wij raden aan om de accu's vaker dan om de 6 maanden op te laden.

Neem de opslagomstandigheden in het hoofdstuk "Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden" in acht.

## Oorstukjes


### Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Dit kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Reinig de oorstukjes dagelijks.

Voor alle type oorstukjes:

- Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.

Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.

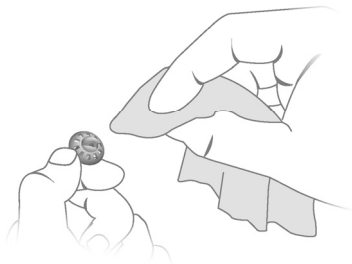





## Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk "Componenten en benamingen", heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

- Om een oude oordop of Sleeve te verwijderen, volgt u de onderstaande afbeelding. Zorg ervoor dat u niet aan de luidsprekerverbinding trekt.

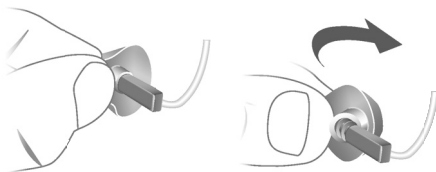

- ▶ Let erop dat de nieuwe oordop of Sleeve de retentieringen van de luidspreker volledig bedekt.
- ▶ Controleer of de nieuwe oordop of Sleeve stevig vastzit.

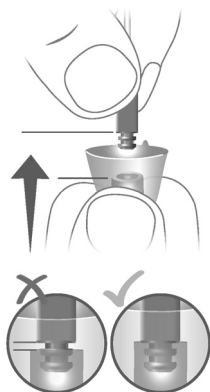

## **Professioneel onderhoud**

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en cerumenfilters moeten door uw audicien worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

## Belangrijke veiligheidsinformatie



### **WAARSCHUWING**

In uw hoortoestel is permanent een oplaadbare lithium-ionbatterij ingebouwd. Door onjuist gebruik van het hoortoestel kan de oplaadbare batterij barsten.

Risico van letsel, brand of explosie!

- ▶ Volg de veiligheidsinstructies voor oplaadbare lithium-ionbatterijen in dit hoofdstuk.



### **WAARSCHUWING**

Risico van elektrische schok!

- ▶ Sluit de oplader alleen aan met een USB-stroomkabel die voldoet aan IEC 60950-1 en/of IEC 62368-1.



## WAARSCHUWING

- ▶ Neem de gebruiksomstandigheden in acht.
- ▶ Let er in het bijzonder op dat u uw toestel beschermt tegen extreme hitte (bijv. vuur, magnetron, inductiefornuis of andere hoge inductievelden) en zonlicht.
- ▶ Laad uw hoortoestellen alleen op met een goedgekeurde lader. Vraag uw audicien om hulp.
- ▶ Het toestel niet demonteren.
- ▶ Het toestel niet gebruiken in explosieve omgevingen.
- ▶ Gebruik geen toestellen die vervormd of duidelijk beschadigd zijn.
- ▶ Het toestel niet gebruiken als de prestaties na het opladen sterk verminderen. Breng het toestel terug naar uw audicien.
- ▶ Gooi het toestel niet weg door middel van vuur of water.



## **WAARSCHUWING**

Vervanging en herstel mag alleen door een specialist gebeuren. Daarom:

- ▶ De oplaadbare lithium-ion-batterij niet zelf herstellen of vervangen.
- ▶ In het onwaarschijnlijke geval dat een oplaadbare lithium-ion-batterij barst of explodeert, alle brandbare materialen buiten bereik houden.

Breng in alle bovenstaande gevallen uw toestel terug naar de audicien.

Meer informatie over de veiligheid vindt u in de veiligheidshandleiding die met het toestel wordt geleverd.

# Meer informatie

## Accessoires

U kunt uw hoortoestellen op afstand bedienen met behulp van een smartphone-app (in veel landen beschikbaar).

Met deze app kunt u uw hoortoestellen vanaf uw smartphone aanpassen en zelfs uw gehoorbeleving aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

## Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden

De hoortoestellen werken in de volgende omgevingsomstandigheden (geldt ook als de toestellen niet worden gebruikt):

<b>Gebruiksomstandigheden</b>	<b>Ontladen</b>	<b>Opladen</b>
Temperatuur	0-50 °C (32-122 °F)	10-35 °C (50-95 °F)
Relatieve luchtvochtigheid	5-93%	5-93%
Atmosferische druk	700- 1060 hPa	700- 1060 hPa

Neem tijdens langdurige periodes van transport en opslag de volgende voorwaarden in acht:

	<b>Opslag</b>	<b>Transport</b>
Temperatuur (aanbevolen)	10-25 °C (50-77 °F)	-20-60 °C (-4-140 °F)
Temperatuur (maximaal bereik)	10-40 °C (50-104 °F)	-20-60 °C (-4-140 °F)
Relatieve luchtvochtigheid (aanbevolen)	20-80%	5-90%
Relatieve luchtvochtigheid (maximaal bereik)	10-80%	5-90%
Atmosferische druk	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Let op: u moet de hoortoestellen minstens elke 6 maanden opladen. We raden aan om de hoortoestellen elke 3 maanden op te laden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Voor andere onderdelen, zoals de lader, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.



#### **WAARSCHUWING**

Risico van letsel, brand of explosie tijdens verzending.

- ▶ Verzend lithium-batterijen en hoortoestellen volgens de plaatselijke voorschriften.



## **Verwijderingsinformatie**

- ▶ Vermijd milieuvervuiling, gooi geen accu's of toestellen bij het huishoudelijk afval.
- ▶ Recycle of verwijder verpakkingen, accu's en toestellen volgens de lokale voorschriften.

## In dit document gebruikte symbolen

### Symbolen op het toestel of de verpakking

---



Duidt op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.

---



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.

---



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw toestel.

---



CE-conformiteitslabel, bevestigt de conformiteit met bepaalde Europese Richtlijnen, zie het hoofdstuk "Conformiteitsinformatie".

---



Geeft de wettelijke fabrikant van het apparaat aan.

---

Made for

iPhone | iPad | iPod

"Made for iPod", "Made for iPhone"

en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor een verbinding met een iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat, of in hoeverre dit voldoet aan de veiligheidsstandaarden en regelgeving. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze accessoire met een iPhone, iPad of iPod de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

## **Probleemoplossing voor hoortoestel**

### **Problemen en mogelijke oplossingen**

---

Het geluid is zwak.

---

- Verhoog het volume.
  - Laad het hoortoestel op.
  - Reinig of verwissel het oorstukje.
- 

Het hoortoestel maakt een fluitend geluid.

---

- Plaats het oorstukje opnieuw tot het stevig zit.
  - Verlaag het volume.
  - Reinig of verwissel het oorstukje.
- 

Het geluid klinkt vervormd.

---

- Verlaag het volume.
  - Laad het hoortoestel op.
  - Reinig of verwissel het oorstukje.
- 

Het hoortoestel zendt signaaltone uit

---

- Laad het hoortoestel op.
-

## **Problemen en mogelijke oplossingen**

---

Het hoortoestel werkt niet.

---

- Schakel het hoortoestel in.
  - Laad het hoortoestel op. Let ook op de status-LEDs op de oplader.
- 

Het hoortoestel laadt niet op.

---

- Controleer of de voeding van de lader correct is aangesloten.
  - Controleer of het hoortoestel goed in de lader is geplaatst.
  - Reinig de oplaadcontactpunten van uw lader.
  - Reinig de oplaadcontactpunten van uw lader.
- 

Neem contact op met uw audicien als u overige problemen ondervindt.

## **Specifieke nationale informatie**

### **VS en Canada**

Informatie over certificering voor hoortoestellen met draadloze functie:

Pure C&G IX

- HVIN: RFM003
- Bevat FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Bevat IC: 26428-RFM003

## Service en garantie

**Serienummers**

**Toestel**

**Luidspreker**

---

Links:

---

Rechts:

---

### **Servicedatums**

---

1:

4:

---

2:

5:

---

3:

6:

---

### **Garantie**

---

Datum aankoop:

---

Garantieperiode in maanden:

---

### **Uw audicien**

---



 **Wettelijke fabrikant**

WSAUD A/S  
Nymøllevej 6  
3540 Lyngø  
Denemarken

Document No. 05442-99T01-5400 NL  
Order/Item No. 210 292 42  
[www.wsaud.com](http://www.wsaud.com)  
Master Rev01, 05.2023  
© 07.2023, WSAUD A/S. All rights reserved

  
0123

**[www.signia.net](http://www.signia.net)**