

# CROS IF CIC Li 8

Gebruiksaanwijzing

# Inhoudsopgave

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Welkom</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>Uw CROS-zender</b>               | <b>5</b>  |
| Componenten en benamingen           | 7         |
| Luisterprogramma's                  | 9         |
| Signaaltonen                        | 9         |
| <b>Dagelijks gebruik</b>            | <b>10</b> |
| Opladen                             | 10        |
| In- en uitschakelen                 | 10        |
| Overschakelen naar standby-stand    | 11        |
| De CROS-zender indoen en uitdoen    | 12        |
| Het kiezen van een luisterprogramma | 15        |
| <b>Veelgestelde vragen</b>          | <b>16</b> |
| <b>Onderhoud en verzorging</b>      | <b>18</b> |
| Reinigen                            | 18        |
| Drogen                              | 19        |
| Opslag                              | 19        |
| Oorstukjes                          | 20        |
| Professioneel onderhoud             | 23        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Meer informatie</b>                        | <b>24</b> |
| Accessoires                                   | 24        |
| Verklaring van symbolen                       | 24        |
| Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden | 25        |
| Verwijderingsinformatie                       | 27        |
| Problemen oplossen                            | 28        |
| Conformiteitsinformatie                       | 28        |
| Specifieke nationale informatie               | 31        |
| <b>Belangrijke veiligheidsinformatie</b>      | <b>32</b> |
| Oplaadbare lithium-ionbatterij (accu)         | 32        |
| Persoonlijke veiligheid                       | 34        |
| Productveiligheid                             | 39        |
| Service en garantie                           | 43        |

# Welkom

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een van onze hoortoestelaccessoires.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die dit accessoire zal bieden.



## **VOORZICHTIG**

Lees deze gebruikershandleiding grondig en volledig door. Houd u aan de veiligheidsinformatie, ter voorkoming van schade of letsel.


Het is ook belangrijk dat u de gebruiksaanwijzing en veiligheidshandleiding leest en naleeft voor het hoortoestel dat u met dit accessoire gebruikt.

# Uw CROS-zender

CROS oplossingen zijn ontworpen voor personen met ernstig gehoorverlies in een oor waarbij een hoortoestel geen oplossing biedt. Een CROS-zender die op dit oor wordt gedragen legt geluid van deze zijde vast en brengt dit over naar het hoortoestel op het andere oor. Daardoor kan de drager van het hoortoestel geluiden van beide zijden horen.

CROS zender

hoortoestel

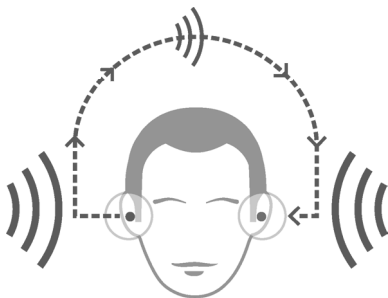

Er zijn twee oplossingen beschikbaar:

- **CROS-oplossing:**

Voor personen met normaal hoorvermogen in een oor en ernstig gehoorverlies in het andere oor. Geluiden van de zijde met gehoorverlies worden vastgelegd en draadloos overgebracht naar de zijde met goed hoorvermogen.

- **BiCROS-oplossing:**

Voor personen met ernstig gehoorverlies in een oor en minder ernstig gehoorverlies in het andere oor. Geluiden van de zijde met het meest ernstige gehoorverlies worden vastgelegd en draadloos overgebracht naar de zijde met beter hoorvermogen. Het hoortoestel verwerkt en versterkt geluiden vanuit beide zijden.


De CROS-zender wordt ondersteund door onze specifieke draadloze hoortoestellen. Uw audicien zal u meer informatie geven over de compatibele modellen.



### **AANWIJZING**

Deze gebruiksaanwijzing is alleen van toepassing op de CROS-zender. Uw hoortoestel heeft een aparte gebruiksaanwijzing.

## Componenten en benamingen

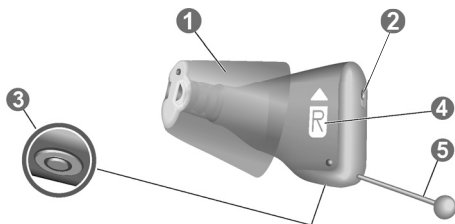

---

❶ Oorstukje

❷ Microfoonopening

❸ Oplaadcontactpunten

❹ Zijde-indicatie  
(R = rechteroor,  
L = linkeroor)

❺ Verwijderingskoordje

---

U kunt het volgende standaard oorstukje gebruiken:

| <b>Standaard oorstukjes</b> |                                                                                   | <b>Formaat</b>                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>    |  | Sleeve 3.0 Vented/Closed/<br>Power |
| <input type="checkbox"/>    |  | Eartip 3.0 Open (optioneel)        |
| <input type="checkbox"/>    |  | Eartip 3.0 Tulip (optioneel)       |

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk worden vervangen. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Onderhoud en verzorging”.

### **Op maat gemaakte oorstukjes**

|                          |                                                                                   |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Earmold 3.0 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|



## Luisterprogramma's

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Het kiezen van een luisterprogramma”.

## Signaaltonen

Signaaltonen van de CROS-zender, zoals een piep als de batterij opraakt, worden naar het hoortoestel gestuurd.


Vraag uw audicien om de signaaltonen te configureren.

# Dagelijks gebruik

## Opladen

Laad met IF CIC Travel Charger uw CROS-zender eerst volledig op. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de lader, waar u ook handige oplaadtips vindt.

Plaats uw CROS-zender in de lader, zoals afgebeeld:

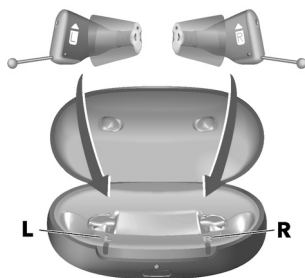

## In- en uitschakelen

U heeft de volgende mogelijkheden om uw toestel in of uit te schakelen.

- Inschakelen: Haal het toestel uit de oplader.

In uw hoortoestel wordt de beginmelodie afgespeeld. Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- Uitschakelen: Plaats het toestel in de oplader.

Let op: de lader moet zijn ingeschakeld.

## Overschakelen naar standby-stand

Met de afstandsbediening kunt u uw toestel in de stand-by modus zetten. Dit dempt het toestel. Wanneer u de stand-bystand verlaat, worden het **laatst gebruikte** volume en luisterprogramma ingesteld.

Opmerking:

- In de stand-bystand is het toestel **niet** volledig uitgeschakeld. Het toestel verbruikt nog een beetje stroom.

Daarom bevelen we aan om de stand-bystand alleen voor korte tijd te gebruiken.

- Als u de stand-bystand wilt verlaten, maar geen toegang hebt tot de afstandsbediening of de app: Zet uw toestel uit en opnieuw aan (door het even in de lader te plaatsen tot de groene LED begint te branden). In dit geval worden het **standaard** volume en luisterprogramma ingesteld.

## De CROS-zender indoen en uitdoen




### VOORZICHTIG

Risico op letsel!


- ▶ Draag dit apparaat altijd met een oorstukje.
- ▶ Let erop dat het oorstukje volledig bevestigd is.

Indoen:

- ▶ Identificeer het rechter en linker apparaat, zodat u het juiste apparaat in het juiste oor doet. De tekst op of de kleur van het apparaat geeft de kant aan:  
rode kleur of gedrukte "R" = rechteroor  
blauwe kleur of bedrukte "L" = linkeroor
- ▶ Zorg ervoor, dat het klepje van de Sleeve aansluit op de lijn op het apparaat.

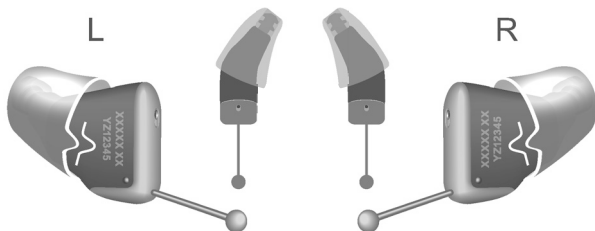

- ▶ Houd het apparaat op de juiste manier vast voordat u het indoe: Let op het verwijderingskoordje dat de onderkant aangeeft. De pijl op het apparaat moet naar boven wijzen.

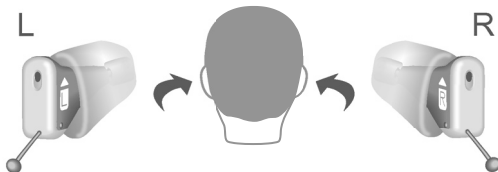

- Druk het apparaat voorzichtig in de gehoorgang.



- Draai het lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat zich lucht in de gehoorgang ophoopt.



## **VOORZICHTIG**

Risico op letsel!

- Plaats het oorstukje voorzichtig en niet te diep in het oor.



- Het kan handig zijn om het **rechter** apparaat met de **rechter** hand en het **linker** apparaat met de **linker** hand in te doen.
- Als u problemen hebt met het indoen van het apparaat, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het apparaat gemakkelijker worden ingedaan.

Uitdoen:

- ▶ Druk zacht tegen de achterkant van uw oor om het apparaat los te werken.
- ▶ Doe het apparaat uit door het verwijderingskoordje naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.



### **VOORZICHTIG**

Risico op letsel!

- ▶ In zeer zelden voorkomende gevallen kan het oorstukje in uw gehoorgang achterblijven wanneer u het toestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorstukje dan verwijderen door een medisch specialist.

Reinig en droog uw toestel na gebruik. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

## **Het kiezen van een luisterprogramma**

Afhankelijk van de luistersituatie past uw toestel het geluid automatisch aan.

Uw toestel heeft mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.

- Voor het wijzigen van het luisterprogramma: raadpleeg het hoofdstuk "Luisterprogramma's" voor een lijst van uw luisterprogramma's.

Het standaard volume wordt toegepast.

# Veelgestelde vragen

Mogelijk hebt u vragen over hoe u uw toestel het beste kunt opladen. Lees de vragen en antwoorden hieronder. Als u meer vragen hebt, dan zal uw audicien u hierbij helpen.

## **Waarom schakelt mijn toestel niet in wanneer ik het uit de oplader haal?**

Controleer het volgende:

- De lader is uitgeschakeld. Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de lader in te schakelen. Zie het hoofdstuk “De lader in- of uitschakelen”.
- De interne batterij van de lader is te zwak. Sluit de lader aan op een stopcontact.

Haal nu uw toestel uit de lader.

## **Hoe kan ik mijn toestel uitschakelen zonder het op te laden?**

- ▶ Plaats het toestel in de oplader. Zorg ervoor dat het op de juiste wijze is geplaatst (status-LED-lampjes gaan branden). Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld en begint met laden.
- ▶ Koppel de lader los van het stopcontact.
- ▶ Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de lader uit te schakelen. Het opladen wordt beëindigd.





### **Waarop moet ik letten bij het opladen?**

Het toestel en de lader moeten schoon en droog zijn. Neem de gebruiksomstandigheden in het hoofdstuk “Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden” in acht. Vermijd het opladen bij hoge temperaturen, aangezien dit de levensduur van de powercell kan verlagen.

Let op: als u de lader gebruikt in een heel warme omgeving, dan stopt deze met opladen als de temperatuur van het toestel of de lader 42 °C overschrijdt. De LED van het toestel en/of de LED van de lader knipperen oranje tijdens de koelfase. Het opladen wordt automatisch hervat als het toestel is afgekoeld. Raak het toestel niet aan totdat de LED-lampjes groen knipperen, want het kan heet zijn.

# Onderhoud en verzorging

Om schade te voorkomen, is het belangrijk dat u zorg draagt voor uw toestel en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen snel deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

## Reinigen

Uw toestel heeft een beschermende coating. Als het echter niet regelmatig wordt gereinigd, kan het toestel beschadigd raken of kan het persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw toestel dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel het toestel nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Gebruik geen alcoholoplossingen op het laadcontact.
- ▶ Gebruik om corrosie te voorkomen een zachte, droge doek om zweet of andere vloeistoffen van het laadcontact of het toestel te vegen voordat u het in de oplader doet.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsproducten, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw toestel in een optimale toestand kunt houden.





## AANWIJZING

- In het onwaarschijnlijke geval dat op het oppervlak van de oplaadcontactpunten corrosie zichtbaar wordt die niet kan worden weggeveegd, moet u het apparaat niet meer dragen en contact opnemen met uw audicien.

## Drogen

U kunt gewone producten gebruiken om uw toestel te drogen. Informeer bij uw audicien naar aanbevolen droogproducten en individuele instructies over wanneer u uw toestel moet drogen.

## Opslag

- Opslag voor korte tijd (tot enkele dagen): Schakel uw apparaat uit door het in de lader te plaatsen.

De lader moet zijn ingeschakeld. Als de lader niet is ingeschakeld en u uw toestel in de lader plaatst, worden het toestel **niet** uitgeschakeld.

Als u het toestel uitschakelt via een afstandsbediening, wordt het toestel **niet** volledig uitgeschakeld. Het toestel bevindt zich in de stand-bystand en verbruikt nog een beetje stroom.

- Opslag voor lange tijd (weken, maanden, ...): Laad uw toestel eerst volledig op. Laat het in de lader met het deksel dicht. Als het toestel volledig is geladen, worden de lader en het toestel automatisch uitgeschakeld.

Wij raden aan om droogproducten te gebruiken bij het opbergen van het toestel.

Als u uw toestel langer dan 3 maanden wilt opbergen, doe het dan in de lader en zorg ervoor dat de lader is uitgeschakeld.

Neem de opslagomstandigheden in het hoofdstuk “Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden” in acht.


## Oorstukjes

### Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Dit kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Reinig het oorstukje dagelijks.

- Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.


Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.

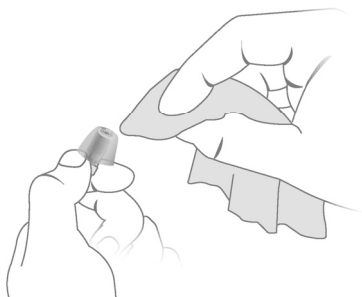



## Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk “Componenten en benamingen”, heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

- Om een oude Eartip of Sleeve te verwijderen, volgt u de onderstaande afbeelding.

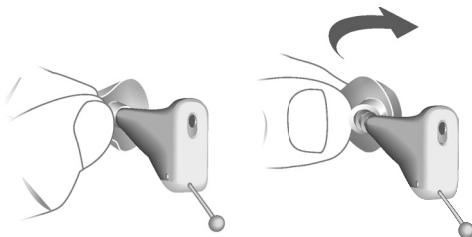


- ▶ Let erop dat de nieuwe oordop of Sleeve de retentieringen van de luidspreker volledig bedekt.
- ▶ Controleer of de nieuwe Eartip of Sleeve stevig vastzit. De Eartip of Sleeve zit goed wanneer de oorsmeerbeschermmer zichtbaar is.

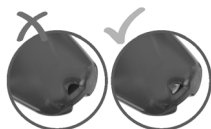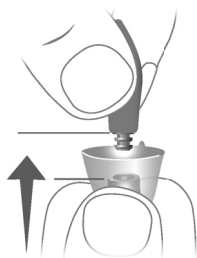

- ▶ Zorg er bij het installeren van de nieuwe Eartip of Sleeve voor dat het klepje van de Eartip of Sleeve aansluit op de streep op het apparaat.

juist

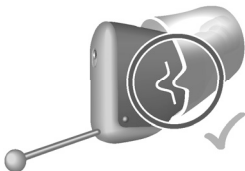

niet juist



## **Professioneel onderhoud**

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en cerumenfilters moeten door uw audicien worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

# Meer informatie

## Accessoires

U kunt uw toestel op afstand bedienen met behulp van een smartphone app (in veel landen beschikbaar). Met deze app kunt u uw toestel vanaf uw smartphone aanpassen en zelfs uw gehoorbeleving aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

## Verklaring van symbolen

### In dit document gebruikte symbolen

---



Duidt op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw apparaat.

### Symbolen op het apparaat of de verpakking

---



CE-conformiteitslabel, bevestigt de conformiteit met bepaalde Europese Richtlijnen, zie het hoofdstuk “Conformiteitsinformatie”.



## Symbolen op het apparaat of de verpakking

---



Conformiteitslabel EMC- en radiocommunicatie Australië, zie het hoofdstuk "Conformiteitsinformatie".

---



Geeft de wettelijke fabrikant van het apparaat aan.

---



Werp het apparaat niet weg met gewoon huishoudelijk afval. Lees meer in het hoofdstuk "Verwijderingsinformatie".

---



Lees de instructies in deze gebruiksaanwijzing en neem deze in acht.

---



Medisch hulpmiddel

---

## Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden

Het toestel werkt in de volgende omgevingsomstandigheden (geldt ook als het toestel niet wordt gebruikt):

| Gebruiksomstandigheden     | Ontladen                       | Opladen                        |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Temperatuur                | 0 tot 50 °C<br>(32 tot 122 °F) | 10 tot 35 °C<br>(50 tot 95 °F) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 93 %                     | 5 tot 93 %                     |
| Atmosferische druk         | 700 tot 1060 hPa               | 700 tot 1060 hPa               |

Neem tijdens langdurige periodes van transport en opslag de onderstaande voorwaarden in acht.

|                                                    | <b>Opslag</b>                   | <b>Transport</b>                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Temperatuur<br>(aanbevolen)                        | 10 tot 25 °C<br>(50 tot 77 °F)  | -20 tot 60 °C<br>(-4 tot 140 °F) |
| Temperatuur<br>(maximaal bereik)                   | 10 tot 40 °C<br>(50 tot 104 °F) | -20 tot 60 °C<br>(-4 tot 140 °F) |
| Relatieve<br>luchtvochtigheid<br>(aanbevolen)      | 20 tot 80 %                     | 5 tot 90%                        |
| Relatieve<br>luchtvochtigheid<br>(maximaal bereik) | 10 tot 80%                      | 5 tot 90%                        |
| Atmosferische<br>druk                              | 700 tot 1060 hPa                | 700 tot 1060 hPa                 |

Houd er rekening mee dat u het toestel ten minste om de 6 maanden moet opladen. We raden u aan het toestel elke 3 maanden op te laden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Voor andere onderdelen, zoals de lader, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.



### **AANWIJZING**

Bewaar uw toestel indien niet gebruikt in de meegeleverde doos of oplaadeenheid (indien van toepassing) en altijd buiten bereik van kinderen.



### **WAARSCHUWING**

Risico van letsel, brand of explosie tijdens verzending.

- Verzend lithium-batterijen en hoortoestellen volgens de plaatselijke voorschriften.

## **Verwijderingsinformatie**

- Vermijd milieuvervuiling, gooi geen accu's of toestellen bij het huishoudelijk afval.
- Recycle of verwijder verpakkingen, accu's en toestellen volgens de lokale voorschriften.

## Problemen oplossen

### Problemen en mogelijke oplossingen

---

Het hoortoestel zendt signaaltönen uit

---

- Laad het toestel op.
  - Zie de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel.
- 

Het toestel werkt niet.

---

- Schakel het toestel in.
  - Laad het toestel op. Let ook op de status-LEDs op de oplader.
- 

Het toestel laat niet op.

---

- Controleer of de voeding van de lader correct is aangesloten.
  - Controleer of het toestel goed in de lader is geplaatst.
  - Reinig de oplaadcontactpunten van uw toestel.
  - Reinig de oplaadcontactpunten van uw lader.
- 

Neem contact op met uw audicien als u overige problemen ondervindt.

### Conformiteitsinformatie

De CE-markering geeft conformiteit met de volgende Europese richtlijnen en voorschriften aan:

- 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- 2014/53/EU betreffende radioapparatuur
- 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen.

De volledig tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen van [www.wsaud.com/audioservice/](http://www.wsaud.com/audioservice/).

De ACMA conformiteitsmarkering  geeft de conformiteit met de elektromagnetische interferentienormen aan, die opgesteld zijn door de Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Toestellen met de FCC-markering komen overeen met de normen van de FCC m.b.t. elektromagnetische interferentie.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan ISED's licentie-vrijstelling RSSs.

De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- dit apparaat moet bestand zijn tegen ontvangen interferentie, inclusief interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Als deze apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie veroorzaken bij radioverbindingen. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in een bepaalde installatie geen interferentie kan optreden. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht om te proberen de interferentie te verhelpen via een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de luidspreker.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact binnen een ander circuit dan waarop de luidspreker is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-reparateur.

FCC waarschuwing: Wanneer wijzigingen of aanpassingen worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de partij die verantwoordelijk is voor deze overeenstemming, kan het recht van de gebruiker komen te vervallen om deze apparatuur te gebruiken.

## **Specifieke nationale informatie**

### **VS en Canada**

Informatie over certificering voor toestellen met draadloze functie:

CROS IF CIC Li 8

Type: MIM003

- Bevat FCC ID: 2AXDT-MIM003
- Bevat IC: 26428-MIM003

# Belangrijke veiligheidsinformatie

## Oplaadbare lithium-ionbatterij (accu)



### **WAARSCHUWING**

In uw hoortoestel is permanent een oplaadbare lithium-ionbatterij ingebouwd. Door onjuist gebruik van het hoortoestel kan de oplaadbare batterij barsten.

Risico van letsel, brand of explosie!

- ▶ Volg de veiligheidsinstructies voor oplaadbare lithium-ionbatterijen in dit hoofdstuk.



### **WAARSCHUWING**

Risico van elektrische schok!

- ▶ Sluit de oplader alleen aan met een USB-stroomkabel die voldoet aan IEC 60950-1 en/of IEC 62368-1.





## WAARSCHUWING

- ▶ Neem de gebruiksomstandigheden in acht.
- ▶ Let er in het bijzonder op dat u uw toestel beschermt tegen extreme hitte (bijv. vuur, magnetron, inductiefornuis of andere hoge inductievelden) en zonlicht.
- ▶ Laad uw hoortoestellen alleen op met een goedgekeurde lader. Vraag uw audicien om hulp.
- ▶ Het toestel niet demonteren.
- ▶ Het toestel niet gebruiken in explosieve omgevingen.
- ▶ Gebruik geen toestellen die vervormd of duidelijk beschadigd zijn.
- ▶ Het toestel niet gebruiken als de prestaties na het opladen sterk verminderen. Breng het toestel terug naar uw audicien.
- ▶ Gooi het toestel niet weg door middel van vuur of water.



## **WAARSCHUWING**

Vervanging en herstel mag alleen door een specialist gebeuren. Daarom:

- ▶ De oplaadbare lithium-ion-batterij niet zelf herstellen of vervangen.
- ▶ In het onwaarschijnlijke geval dat een oplaadbare lithium-ion-batterij barst of explodeert, alle brandbare materialen buiten bereik houden.

Breng in alle bovenstaande gevallen uw toestel terug naar de audicien.

## **Persoonlijke veiligheid**



### **WAARSCHUWING**

Risico van beïnvloeding van elektronische apparatuur!

- ▶ In omgevingen waar beperkingen gelden voor het gebruik van elektronica of draadloze apparatuur, dient u te verifiëren of uw apparaat uitgeschakeld moet worden.



### **WAARSCHUWING**

Risico op letsel!

- ▶ Gebruik duidelijk beschadigde toestellen niet en breng ze terug naar het verkooppunt.



## **WAARSCHUWING**

Houd er rekening mee dat alle onbevoegde veranderingen aan het product schade aan het product of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

- ▶ Alleen gebruik van goedgekeurde onderdelen en accessoires is toegestaan. Vraag uw audicien om hulp.
- ▶ Wijzig dit product niet zonder toestemming van de fabrikant.
- ▶ Indien dit product wordt gewijzigd, moeten de nodige inspecties en tests worden uitgevoerd om een veilig gebruik van het product te garanderen.



## **WAARSCHUWING**

**Verstikkingsgevaar!**

Uw toestel bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

- ▶ Houd hoortoestellen, batterijen en accessoires buiten het bereik van kinderen en van mensen met een verstandelijke beperking.
- ▶ Raadpleeg, als onderdelen zijn ingeslikt, onmiddellijk een arts of ga naar een ziekenhuis.



### **WAARSCHUWING**

Neem bij inslikken van de accu contact op met de Poisons Information Hotline via 13 11 26 in Australië en 0800 764 766 in Nieuw-Zeeland. Voor andere landen, neem contact op met het plaatselijke vergiftigingscentrum of de huisarts.



### **WAARSCHUWING**

Uw toestel kan het volume van bepaalde achtergrondgeluiden verminderen, mogelijk ook verkeers- of waarschuwingssignalen.



### **WAARSCHUWING**

Risico van explosie!

- Gebruik uw apparatuur niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst (bijv. in de mijnbouw).



## **WAARSCHUWING**

Interferentie met implanteerbare toestellen

- ▶ Het toestel kan gebruikt worden met alle elektronische implantaten die overeenkomen met ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, de norm betreffende elektromagnetische compatibiliteit voor menselijke implantaten.
- ▶ Indien uw implantaat niet voldoet aan de norm ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, moet u contact opnemen met de fabrikant van uw implanteerbare apparaat voor informatie over het storingsrisico.

### Contra-indicaties



## **WAARSCHUWING**

Raadpleeg een audicien als u last heeft van ongebruikelijke bijwerkingen, zoals huidirritatie, overmatige ophoping van oorsmeer, duizeligheid, verandering in uw gehoor, of als u denkt dat er een vreemd voorwerp in uw gehoorgang zit.



## **WAARSCHUWING**

Als u een contactallergie heeft, raadpleeg dan de fabrikant van het hoortoestel over de aanwezigheid van het allergen voordat u het hoortoestel gebruikt. Ontstaat er een allergische reactie na het dragen van het hoortoestel, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.



## **WAARSCHUWING**

Een audicien moet een toekomstige gebruiker van een toestel adviseren om een bevoegde arts te raadplegen voordat het toestel wordt gebruikt als de audicien heeft vastgesteld dat de toekomstige gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

- ▶ Zichtbare erfelijke of traumatische vervorming van het oor.
- ▶ Eerder voorkomend loopoor in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Eerder voorkomend of snel progressief gehoorverlies in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Acute of chronische duizeligheid.
- ▶ Enkelzijdig gehoorverlies of plotseling of recent ontstaan hiervan in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Audiometrische air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hz, 1.000 Hz en 2.000 Hz.
- ▶ Zichtbaar bewijs van significante cerumenophoping of een vreemd lichaam in de gehoorgang.
- ▶ Pijn of ongemak in het oor (bijv. kort geleden of momenteel een oorontsteking).

## Productveiligheid



### AANWIJZING

- Bescherm uw apparatuur voor extreme hitte. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht.



### AANWIJZING

- Droog uw apparatuur niet in de magnetron.



### AANWIJZING

Verschillende typen krachtige straling, bijv. bij röntgen- of MRI- onderzoek van het hoofd, kan apparatuur beschadigd raken.

- Gebruik de apparatuur niet tijdens deze of vergelijkbare procedures.

Zwakkere straling, bijv. van radio-apparatuur of bij beveiliging op het vliegveld, beschadigt de apparatuur niet.



### AANWIJZING

- Bescherm uw apparatuur voor hoge luchtvochtigheid. Draag ze niet onder de douche of wanneer u make-up, parfum, aftershave, haarlak of zonnebrandmiddel opdoet.



In sommige landen gelden restricties voor het gebruik van draadloze apparatuur.

- Neem contact op met de plaatselijke overheid voor meer informatie.



### **AANWIJZING**

Uw toestel is zo ontworpen dat het voldoet aan internationale normen voor elektromagnetische compatibiliteit, maar het is mogelijk dat het interferentie veroorzaakt van elektronische apparatuur die dicht bij het toestel is geplaatst. Blijf in dat geval op enige afstand van de bron van de interferentie.







## **Service en garantie**

### **Serienummers**

Links:

Rechts:

### **Servicedatums**

1:

4:

2:

5:

3:

6:

### **Garantie**

Datum aankoop:

Garantieperiode in maanden:

### **Uw audicien**



**Wettelijke fabrikant**

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Denemarken

Document No. 05643-99T01-5400 NL

Order/Item No. 210 365 57

Master Rev01, 10.2023

[www.wsaud.com](http://www.wsaud.com)

© 01.2024, WSAUD A/S. All rights reserved



**[www.audioservice.com](http://www.audioservice.com)**